

## LLINELL GYMORTH DDIGIDOL TUNSTALL

### CANLLAW SEFYDLU HAWDD

Mae'r canllaw hwn ar gyfer cwsmeriaid ac aelodau o'r teulu. Mae'n esbonio sut i sefydlu'r Llinell gymorth Ddigidol Tunstall mewn ychydig o gamau syml.



### BETH SYDD YN Y BOCS

- Uned Llinell Gymorth Ddigidol
- Ceb1 pŵer a phlwg
- Larwm o gwmpas y gwddf neu'r arddwrn
- Cerdyn gwybodaeth cyflym


Os oes unrhyw beth ar goll, cysylltwch â ni



### CYN I CHI DDECHRAU



- ✓ Gosodwch yr uned llinell gymorth yn y **prif le byw**
- ✓ Dylai fod yn **agos at soced pŵer**
- ✓ Gall yr uned gysylltu mewn dwy ffordd:
  - **Opsiwn A: Rhwydwaith symudol** (nid oes angen llinell ffôn na rhyngrwyd)
  - **Opsiwn B: Llwybrydd band eang yn y cartref** (gan ddefnyddio ceb1 rhyngrwyd)



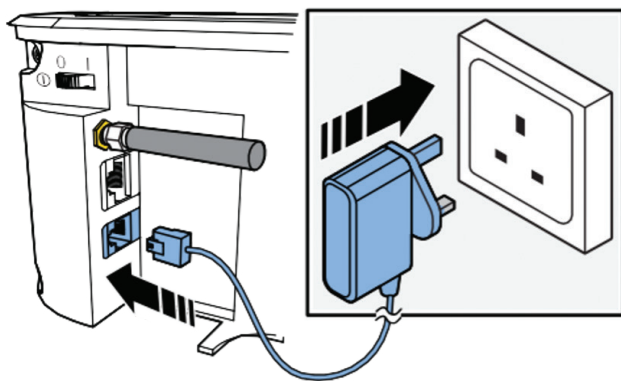

## CAM 1: PLYGIO'R CEBL I MEWN

Tynnwch yr uned a'r cebl pŵer allan o'r bocs

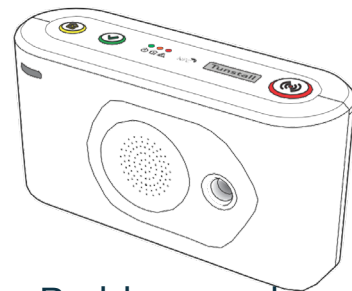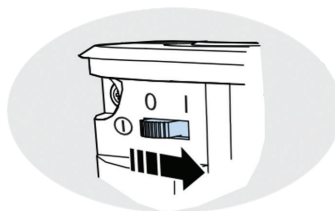

Plygiwch y cebl pŵer yng nghefn yr uned llinell gymorth

Plygiwch y pen arall i mewn i'r soced wal

Trowch y pŵer ymlaen

Bydd yr uned yn goleuo ac yn dechrau yn awtomatig

## CAM 2: CYSYLLTU'R UNED



### Opsiwn A: Rhwydwaith symudol

*Defnyddiwch yr opsiwn hwn oni bai ein bod wedi dweud wrthy'ch fel arall*

- Peidiwch â phlygio unrhyw beth arall i'r uned
- Bydd y llinell gymorth yn cysylltu'n awtomatig gan ddefnyddio'r rhwydwaith symudol
- Gallai hyn gymryd rhai munudau

*Pan fydd yn barod, bydd y goleuadau yn stopio fflachio neu bydd llais yn cadarnhau ei fod yn gweithio*

### Opsiwn B: Defnyddio eich llwybrydd band eang yn y cartref

*Defnyddiwch yr opsiwn hwn dim ond os ydyn ni wedi dweud wrthy'ch chi*

- Plygiwch un pen o'r cebl rhynggrwyd i mewn i'r uned llinell gymorth
- Plygiwch y pen arall i'ch llwybrydd band eang
- Gadewch y pŵer arno

*Bydd yr uned yn cysylltu'n awtomatig  
Gall hyn gymryd rhai munudau*

### CAM 3: PROFI'R LLINELL GYMORTH

- Pwyswch y **botwm cymorth coch** ar yr uned llinell gymorth
- Aros i'r gweithredwr ateb
- Dywedwch wrthyn nhw mai **galwad prawf** ydyw

*Mae hyn yn cadarnhau bod yr uned wedi'i chysylltu ac yn gweithio*

### CAM 4: PROFI'R LARWM GWDDF NEU'R LARWM AR YR ARDDWRN

- Gwisgwch y larwm o gwmpas eich gwddf neu'ch arddwrn
- Gwasgwch y botwm ar y larwm
- Siaradwch â'r gweithredwr pan fydd yn ateb

*Mae hyn yn gwirio bod y larwm yn gweithio unrhyw le yn y cartref*

