

CAREIUM ABBY

CANLLAW SEFYDLU HAWDD

Mae'r canllaw hwn ar gyfer
cwsmeriaid ac aelodau o'r teulu.
Dilynwch y camau syml isod i osod
eich Careium Abby.



BETH SYDD YN Y BOCS

- Dyfais larwm symudol Abby
- Crud gwefru
- Cebî pŵer a phlwg
- Cortyn
- Cerdyn gwybodaeth cyflym

Os oes unrhyw beth ar goll, cysylltwch â ni.



CYN I CHI DDECHRAU


- ✓ Mae Abby yn **larwm symudol** sy'n gweithio **y tu mewn a'r tu allan i'r cartref**
- ✓ Dewiswch le i blygio'r **crud gwefru** (fel arfer yn y prif le byw)
- ✓ Dylai'r crud fod **ger soced pŵer**
- ✓ Mae'n defnyddio'r **rhwydwaith symudol** – nid oes angen llinell ffôn na rhyngwyd



CAM 1: PLYGIO I'R CRUD GWEFRU


- Plygiwch y cebl pŵer i'r crud gwefru
- Plygiwch y pen arall i mewn i'r soced wal
- Trowch y pŵer ymlaen

Mae'r crud bellach yn barod i'w ddefnyddio

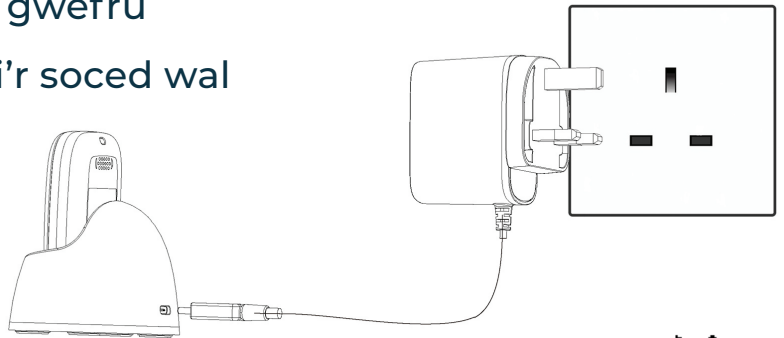

CAM 2: GOSOD Y DDYFAIS YN Y CRUD


- Gosodwch y ddyfais yn y crud gwefru
- Bydd yn troi ymlaen yn awtomatig

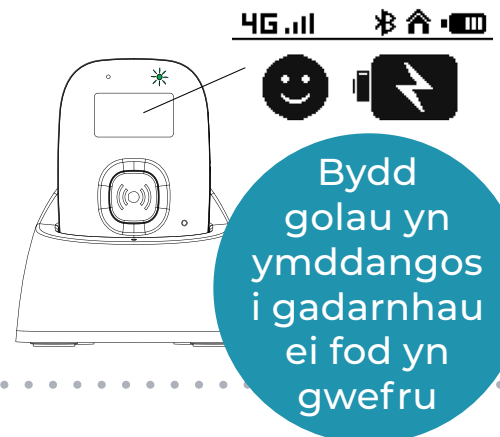

CAM 3: COFIO GWEFRU'R LARWM CYN EI DDEFNYDDIO AM Y TRO CYNTAF

- Gadewch y ddyfais yn y crud i wefru'n llawn
- Gall hyn gymryd hyd at **5 awr** y tro cyntaf

Mae golau gwyrdd solet yn golygu ei fod wedi'i wefru'n llawn

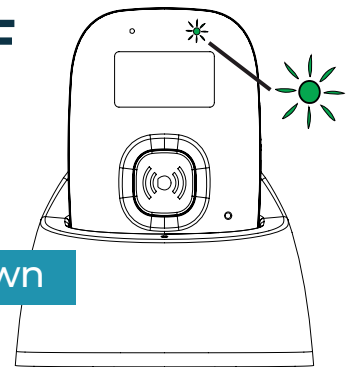

CAM 4: PROFI EICH LARWM

- Tynnwch y ddyfais allan o'r crud
- Pwyswch a daliwch y **botwm cymorth** am **3 eiliad** (neu pwyswch 3 gwaith yn gyflym)
- Aros i'r gweithredwr siarad â chi
- Dywedwch wrthyn nhw mai **galwad prawf** ydyw

